

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE DELTA 20®
LED Dermatoskop




⌵ **Die neue Dimension der Dermatoskopie.**
Diagnostizieren. Dokumentieren. Archivieren.

Die Früherkennung des malignen Melanoms hat in der Dermatologie immer mehr an Bedeutung gewonnen. In Deutschland liegt die jährliche Steigerungsrate der Neuerkrankungen bei circa 5 bis 10 Prozent, während sich international in den letzten 15 Jahren die Zahl der malignen Melanome in fast allen Erdteilen mit weißer Bevölkerung nahezu verdoppelt hat. Bei frühzeitiger Erkennung besteht jedoch eine recht hohe Heilungschance.

Als langjähriger Marktführer im Bereich der Dermatoskopie setzt HEINE Optotechnik mit dem HEINE DELTA 20® Dermatoskop den neuen Qualitätsstandard. Das DELTA 20 mit 3-LED-Lateralbeleuchtung / 6-LED-Vollausleuchtung sowie hochauflösender Präzisionsoptik mit achromatischen Linsen ist das Resultat langjähriger konsequenter Forschung und Produktentwicklung.

Das HEINE DELTA 20® Dermatoskopie-System

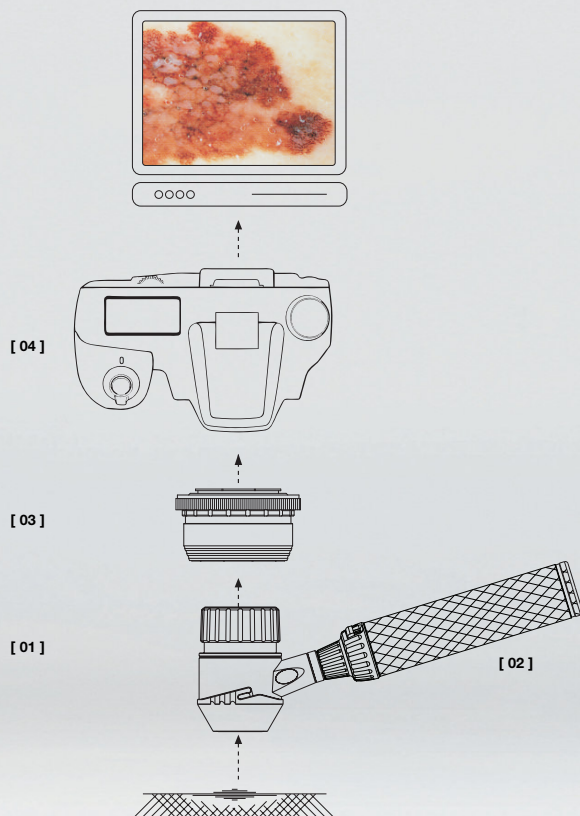

[01] HEINE DELTA 20® Dermatoskop

- 10fache Vergrößerung mit hoch auflösender Präzisionsoptik mit achromatischen Linsen für randscharfe, verzerrungsfreie Abbildungen und brillante Bilder.
- Außergewöhnliche Helligkeit mit tageslichtähnlicher homogener 6-LED-Vollausleuchtung.
- Mit DELTA 20 ist die klassische Kontaktdermatoskopie mit Öl oder Desinfektionsspray o.ä. die Methode der Wahl. Erheblich mehr Feinstrukturen der Pigmentveränderung werden sichtbar und die Diagnose sicherer.
- Inklusive Kompendium mit Bildatlas zur Differentialanalyse pigmentierter Hautveränderungen mit Hilfe des Dermatoskops.

[02] HEINE BETA® Griff

- Spannungsstabilisiertes System für umfassende Kompatibilität mit allen 2,5 V und 3,5 V BETA Griffen.

[03] HEINE SLR Fotoadapter

- Integrierte Fokussierrastung garantiert jederzeit scharfe Aufnahmen.
- Einfache Montage.

[04] Foto-Dokumentation

- Inklusive Anleitung zur Fotodokumentation. (Eine Liste mit kompatiblen Digitalkameras finden Sie bei www.heine.com unter DELTA20/Kameras für DELTA 20).

HEINE DELTA 20® DERMATOSKOPIE-SYSTEM

Höchste Qualität ist die beste Voraussetzung für eine sichere Diagnosefindung. Mit seiner hoch auflösenden Präzisionsoptik und der einmaligen Beleuchtungseinheit (patent pending) ist das DELTA 20 Dermatoskop zur auflichtmikroskopischen Untersuchung pigmentierter Hautveränderungen optimal geeignet.

Das einzigartige achromatische Linsensystem macht Veränderungen des Pigmentnetzes und andere Hautmerkmale mit 10facher Vergrößerung verzerrungsfrei und randscharf sichtbar. Digitale Fotoaufnahmen in brillanter Qualität sind sowohl für den dermatoskopischen als auch für den klinischen Bereich möglich.

Technische Spezifikation

DELTA 20 DERMATOSKOP

- ✚ **Optik.**
Hochauflösende Präzisionsoptik mit achromatischen Linsen.
- ✚ **Vergrößerung.**
10fach
- ✚ **Übersichtsfeld.**
ø 23 mm
- ✚ **Beleuchtung.**
Wahlweise tageslichtähnliche 6-LED Vollausleuchtung oder 3-LED-Lateralbeleuchtung zur Kontrastverstärkung.
- ✚ **LED Lebensdauer.**
Praktisch unbegrenzte Lebensdauer.
- ✚ **Okular.**
Individuelle Schärfeneinstellung mit Korrekturausgleich im Bereich von -6/+6 dpt. Große Augenmuschel mit weicher Oberfläche verhindert Beschädigung der Augengläser.
- ✚ **Kontaktscheiben.**
Große Kontaktscheibe (ø 23 mm).
Kleine Kontaktscheibe (ø 8 mm) für schwer zugängliche Stellen. Fotoaufnahmen mit großer und kleiner Kontaktscheibe möglich.
HEINE Design für einen einfachen Wechsel und festen Sitz.
Autoklavierbar bei 134 °C/5 min.

SLR FOTOADAPTER FÜR DIGITALE SPIEGELREFLEXKAMERAS

Integrierte Fokussierastung verhindert eine Veränderung der Okularposition und garantiert somit immer scharfe Bilder. Einfache One-Step Montage des Adapters. Freie Bewegung auf 360° zwischen Kamera und Dermatoskop. Einfaches Handling.

Empfehlung für Fotoanwendung:


HEINE Modulbauweise erlaubt für die Stromversorgung die Verwendung eines Verbindungskabels zwischen Instrumentenkopf und Stromquelle. Dies ermöglicht besonders komfortables Fotografieren ohne Batterie-/Ladegriff am Instrumentenkopf.

Empfohlen für folgende Spiegelreflexkameras:

- Canon
- Nikon
- Olympus

STROMQUELLEN

Spannungsstabilisiertes System. Wahlweise 2,5V Batteriebetrieb oder 3,5V Ladetechnologie (auch mit Li-ion-Ladebatterie erhältlich). Leicht, ergonomisch und komfortabel. Kompatibel mit jedem HEINE Instrument mit Automatverschluss. Verbesserter Tragekomfort mit BETA Gürtel Clip.

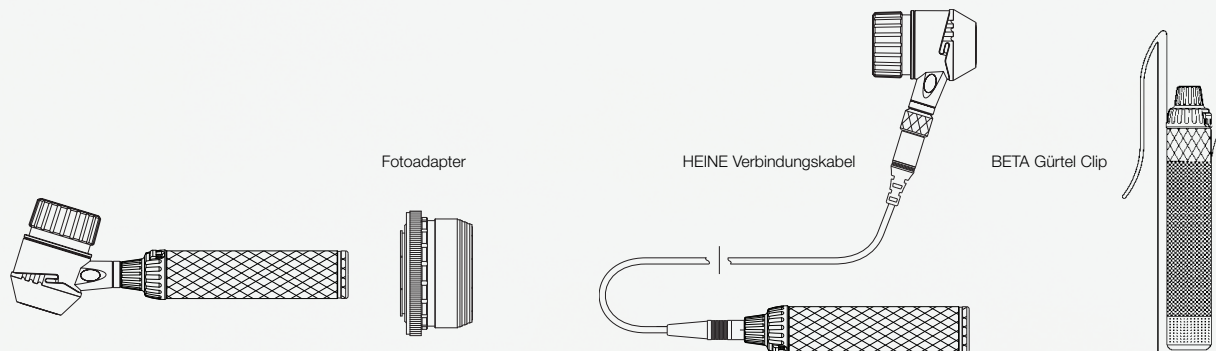


Bestellübersicht

DELTA 20 Dermatoskop-Aufsatz	2,5 V LED	3,5 V LED
inkl. Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skalenmarkierung, Dermatoskopie-Kompodium	K-008.34.201	K-008.34.201
DELTA 20 Dermatoskopie-Set		
bestehend aus DELTA 20 Dermatoskop, Kontaktscheibe 23 mm Ø mit Skalenmarkierung, 10 ml Dermatoskopie-Öl, Dermatoskopie-Kompodium, im Hartschalenetui, komplett mit BETA Batteriegriff	K-256.10.118	
dito, mit BETA R Ladegriff		K-256.20.376
dito, mit Li-ion Ladebatterie		K-256.27.376
dito, mit BETATR Ladegriff inkl. Trafo		K-256.20.384
dito, mit Li-ion Ladebatterie		K-256.27.384
dito, mit BETANT Griff und NT 300 Ladegerät		K-256.20.420
dito, mit  BETA L Griff mit Li-ion Ladebatterie		K-256.29.420

Zubehör

Kontaktscheibe, 23 mm Ø ohne Skalenmarkierung	K-000.34.203
Kontaktscheibe, 23 mm Ø mit Skalenmarkierung	K-000.34.204
Kleine Kontaktscheibe, 8 mm Ø für die Untersuchung schwer zugänglicher Stellen	K-000.34.205
Dermatoskopie-Öl im 6er Pack (je 10 ml), macht die äußeren Hautschichten während der Untersuchung durchsichtig	K-000.34.005
SLR Fotoadapter für Dermatoskop/Digital-Spiegelreflexkamera, mit Optik. Großes Übersichtsfeld, scharfes Bild. Für Canon	K-000.34.185
dito, für Nikon	K-000.34.186
dito, für Olympus	K-000.34.187
Verbindungskabel (1,3 m) für Instrument/Griff	X-000.99.231
BETA Gürtel Clip für BETA Griff	X-000.99.008
Foto-Zubehör Set beinhaltet Fotoadapter, Verbindungskabel und BETA Gürtel Clip	
Foto-Zubehör Set für Canon	K-000.34.190
dito, für Nikon	K-000.34.191
dito, für Olympus	K-000.34.192
Koffer für DELTA 20 und Fotozubehör	K-264.00.000

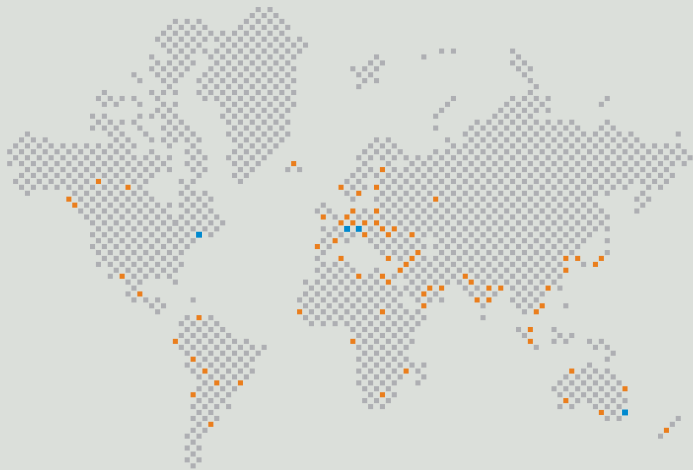

■ HEINE NIEDERLASSUNGEN
■ HEINE VERTRETUNGEN

Ein Unternehmen schreibt Geschichte und gibt seiner ausgezeichneten Produkt-Qualität einen Namen: HEINE.

1946 gegründet, unabhängig, traditionsreich und heute internationaler Marktführer und Komplettanbieter von Diagnostikinstrumenten. HEINE Produkte erfüllen alle internationalen Standards (ISO/CE) und sind in Präzision und ergonomischem Design weltweit führend. Die intensive und kontinuierliche unternehmenseigene Forschung und Produktentwicklung schaffen eine solide und zukunftsweisende Basis für die technische Reife und die ausgezeichnete Qualität aller HEINE Produkte. Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind weltweit über 500 Mitarbeiter.

www.heine.com

DEUTSCHLAND

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERIKA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 742-71 03
Fax (603) 742-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIEN

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SCHWEIZ

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler

10/09. A-000.00.210 d

